

【令和9年4月以降の検体搬送資材について】

令和9年4月より、検体搬送時の安全性確保、漏出防止、搬送中の紛失・取り違い防止、および梱包方法の標準化を目的として、血液検体をお送りいただく際の搬送資材を原則【UN3373マーク付きカテゴリーB対応搬送箱セット】に変更いたします。

令和9年3月までは移行期間とし、従来の搬送箱で到着した検体についても受領いたしますが、準備が整い次第、UN3373マーク付きカテゴリーB対応搬送箱セットでのご提出にご協力をお願いいたします。

令和9年4月以降、UN3373マーク付きカテゴリーB対応搬送箱セット以外で検体が到着した場合には、検体の状態や梱包状況を確認のうえ、受領可否を判断し、必要に応じて再提出をお願いする場合がございます。また検体不備を事前に防止するため、搬送用チェックシートを検体と一緒に同梱していただく運用を予定しております。

施設の皆様には搬送資材の準備等でご負担をおかけいたしますが、検体搬送時の安全性確保および検体取り違い防止のため、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

不明な点はメールにて「令和9年4月以降の検体搬送資材について」の件名でお問い合わせください。

梱包手順・注意事項、搬送用チェックシート、UN3373マーク付きカテゴリーB対応搬送箱等の見本は別紙でご確認いただけます。

かずさ遺伝子検査室


【注意事項】

- 検体はEDTA-2Naまたは2Kの採血管1本(全血・1mL以上)です
 - ※ 採血管(全血)は冷蔵で1か月程度保存可能です 搬送は常温で問題ありません
 - ※ 検体採取に使用される機材(注射器等)は施設の医療安全指針に従って適切に廃棄してください
- 開栓した採血管は受領できません ご事情がある場合はご相談ください
- カテゴリーB(生物学的物質:UN3373)に準じた梱包でお送りください
 - ※ UN3373マーク付きのカテゴリーB対応搬送箱(以下;搬送箱)の最小外寸:120×190×30(mm)
 - ※ 搬送箱に検体とチェックシート以外は入れないでください
- プラスカーゴ社の搬送に限り「着払い」となります

【事故防止のため必ず以下の手順で準備をお願いします】

【検体の梱包・発送の準備】

1. メールに添付のPDFをA4用紙に印刷して、検体ラベル部分を切り取る

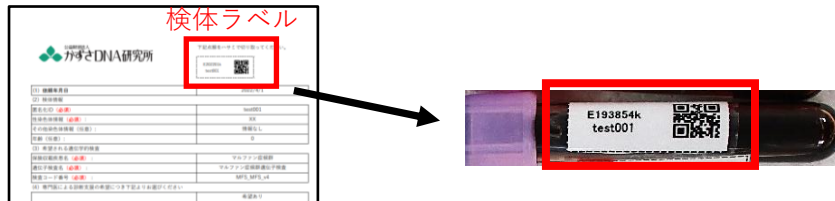

2. 検体ラベルをセロハンテープ等の透明なテープで採血管に貼り付ける
 - ※ 弊所発行のラベルが貼っていない検体は受領できません 着払いでご返送となります
3. 採血管を吸水材とともに、密封パウチ袋(二次容器)に封入してから、UN3373マーク付きの搬送箱に入れる
 - ※ 指定のUN3373マーク付き搬送箱以外の箱では受領できません
 - ※ 1個の搬送箱に複数検体を同梱しても問題ありません
 - 吸水材・密封パウチ袋・搬送箱の見本は別紙(P3)の【参考資料】を参照ください
4. 別紙(P2)の【搬送用チェックシート】のチェック項目全てに☑チェックを入れる
 - ① 搬送用チェックシートを印刷する
 - ② チェック項目全てに☑チェックを入れる
 - ③ チェックシートを採血管と一緒に搬送箱に同梱する
5. 別紙(P2)の【発送に関する注意事項】に沿って検体を発送する

【搬送用チェックシート】

かずさ遺伝子検査室

1. この【搬送用チェックシート】を印刷する（白黒印刷可）

2. 以下のチェック項目全てに☑チェックを入れ、採血管と一緒に搬送箱に同梱する

※ この搬送用チェックシートが検体と一緒に届かなかった時は、**検体受領が出来ない**場合がありますのでご注意ください

梱包準備をしたのは、（お名前）_____です

- ☐ 採血管(全血)が _____ 本入っています
- ☐ 全ての採血管にかずさ発行の検体ラベル(QRコード)を貼りました
- ☐ 採血管は開栓していません（血液漏れはしていません）
- ☐ 採血管を吸水材とともに、密封パウチ袋(二次容器)に入れました
- ☐ 搬送用伝票を貼ってから、搬送会社へ渡します



【発送に関する注意事項】

・ 搬送箱に検体とチェックシート以外は入れないでください

※ 上記以外の物が同梱されていた場合は、返送いたします

・ 採血後、検体の発送準備が整ってから回収依頼をしてください

・ 検体受領可能日の午前着になるようにお送りください

※ 検体受領可能日は ホームページのカレンダーでご確認いただけます

※ 検体が午後または受領不可日に届いた場合、検体受付は原則翌営業日以降となります

・ プラスカーゴ社をご利用の場合は弊所が送料を負担いたします

※ プラスカーゴ社の回収が難しい一部地域につきましては、大変申し訳ございませんがご施設でご利用の搬送会社の【常温・発払い】でお送りください

【プラスカーゴ社への回収依頼】

1. プラスカーゴ社に回収日の前営業日の16時までにメールで回収依頼をする

※ 回収依頼書はかずさ遺伝子検査室のホームページからダウンロードできます

※ 検体受領可能日は ホームページのカレンダーでご確認いただけます

2. プラスカーゴ社から返信メールがきたら回収依頼完了です

3. 搬送箱に搬送用伝票(着払い)を貼り付ける

※ 搬送用伝票は回収日にプラスカーゴ社が持参しますが、**貼付は施設側**でしてください

プラスカーゴサービス（株） E-mail: pcs-kentai@plus-cs.co.jp TEL: 06-6474-6144

【かずさ遺伝子検査室】

住所：〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-23

かずさバイオ共同研究開発センター かずさDNA研究所 遺伝子検査室

URL : <https://www.genetest.jp/index.html>

Email : onjk@kazusa.or.jp



Home



【カテゴリーB対応搬送箱セットについて】

カテゴリーB対応搬送箱セットについては、医療機関の皆様にご利用いただけるよう、入手方法を現在調整しております。詳細は決まり次第、弊社ホームページでご案内いたします。なお、弊社が示す梱包条件を満たす市販の同等品もご使用いただけます。

【参考資料】

吸水材・密封パウチ袋・搬送箱（見本）



トレンドサイン社「バイオメーラー1」 外寸：125 x 190 x 30(mm)



スギヤマゲン社「バリアボックス5」 外寸：120 x 200 x 30(mm)